

Le lit médicalisé électrique ultra bas **VISIONA** est un lit « connecté » avec 5 types d'alertes > 1 alerte principale (inclus dans l'offre) : **la hauteur du lit permettant de limiter le risque de chutes et de blessures pour le résident en alertant d'un mauvais réglage de la hauteur du lit**

> 4 alertes optionnelles : la présence du résident, la position des barrières, l'activation des freins et la détection de l'incontinence.

La prise en main est intuitive grâce à la centralisation des commandes depuis la Nurse Control située sur le lit.
Les capteurs nécessaires à la sécurité du résident sont invisibles: aucune nuisance, l'environnement de la chambre est préservé.



Spécifications techniques

SYSTÈME D'ÉLÉVATION

EN COLONNE < SPÉCIFIQUE FLOORE, VISIONA >

• La conception à vérins électriques intégrés dans les colonnes permet une accessibilité complète sous le lit améliorant le travail du personnel et permettant des gains de productivité

FONCTIONS

MULTIFONCTIONNEL

• Hauteur variable / Relève buste (à translation) / Relèves jambes (plicature des genoux) / Proclive & Déclive / Position fauteuil



ALERTE – HAUTEUR DU LIT

(INCLUS DE BASE)

• Détection si le lit n'est plus en position basse sécurisée (23 cm du sol)

Lumière verte : position basse sécurisante

Lumière rouge : position dangereuse

L'alerte visuelle peut être accompagnée d'une alerte sonore

COMMANDES

• Intuitives via la télécommande filaire (inclus) patient, avec la possibilité de condamner des fonctions

• Nurse Control Soignant (incluse)

Avec pourtour rouge clignotant en cas d'alerte



RALLONGE


• Intégrée en pied de lit avec repose complément de matelas (accès facile et mise en place sans outils)

FREINAGE

• Semi-centralisé bilatéral en tête/pied de lit

ROUES

• Multidirectionnelle (360°) doubles galets de diam. 50 mm
• Capotées de base pour un esthétisme « démedicalisé »

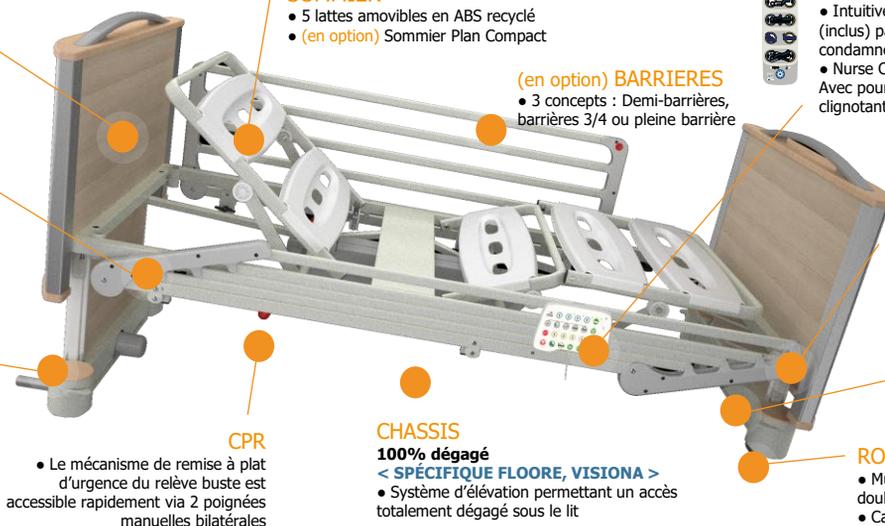

PANNEAUX

• Personnalisables : large choix de stratifié et bois massif vernis

ANCRAGES ACCESSOIRES

• 4 pour porte sérum
• 2 pour support télécommande (à la tête du lit)
• 4 pour porte potence (à la tête et au pied du lit)

BUTÉES MURALES

• Butées de protection fournies (aluminium) se vissant facilement à la tête de lit

SOMMIER

• 5 lattes amovibles en ABS recyclé
• (en option) Sommier Plan Compact

(en option) BARRIÈRES

• 3 concepts : Demi-barrières, barrières 3/4 ou pleine barrière

CPR

• Le mécanisme de remise à plat d'urgence du relève buste est accessible rapidement via 2 poignées manuelles bilatérales

CHASSIS

100% dégagé

< SPÉCIFIQUE FLOORE, VISIONA >

• Système d'élévation permettant un accès totalement dégagé sous le lit

Données principales

Hauteur variable

23 cm – 68 cm

Capacité max. (poids patient)
Poids à vide (sans accessoires)

**220 Kg (185 Kg)
100 Kg**

Angle relève buste
Plicature des genoux
Angle proclive / déclive

**70° (max)
30° (max)
17° / 17° (max)**

Rallonge

12 cm

Dimensions (sans barrières)
Surface de couchage

**220 x 106 cm
200 x 90 cm**

Matériaux

**Acier, Bois massif,
Stratifié**

Roues à double galet

360° / Ø 50 mm

Tension d'alimentation

**100-230 V, 50/60 Hz
Max 3,15 A**

Certification
Normes

**CE (UE 2017/745)
NF EN 60601-2-52
NF EN 60601-1-2
NF EN 60601-1**

Personnalisation et Accessoires



Chêne Vicenza Clair
<NEW> MARS 2024



Chêne Nebraska
Naturel



Chêne Nebraska
Gris

Découvrez l'ensemble des coloris stratifiés disponibles sur notre nuancier

Couleur (structure du lit)



Blanc crème
RAL 9002



Gris anthracite
RAL 7015
Sortie 2025

Barrières disponibles

• Demi-barrières
• Barrières 3/4
• Pleines barrières

Hygiène & Désinfection

• Le produit est à pulvériser ou à appliquer à l'aide d'une lingette à usage unique
• Il est également recommandé de procéder au nettoyage de haut en bas

Accessoires disponibles

• Potence à enrouler
• Tige porte sérum 4 crochets
• Support flexible de télécommande
• Veilleuse sous le lit
• Butée murale longueur 19 cm
• Batterie
• Porte sac urine (sur barrière 3/4)
• Poignée de préhension
• Sommier Plan Compact
• Porte compresseur
• Attaches sangles standard et grande boucle
• Lampe de lecture
• Kit son
• Filet anti-chute d'oreiller
• Protection mousse pour barrière
• Complément de barrière 3/4
• Long pans pour barrière 3/4
• Décor bois pour barrière 3/4
• Chariot de transport

Options – 4 alertes complémentaires



ALERTE – POSITION BARRIERES

OPTION 1

• Les barrières sont indispensables au maintien de la sécurité des résidents, particulièrement pendant la nuit. L'alerte reconnaît les positions «basse» de chaque barrière.

OPTION DISPONIBLE POUR

LES DEMI-BARRIERES & 3/4 UNIQUEMENT

REF : LSUGHCPB3/4LF – Détection barrières

REF : LSUGH2BPLTXO1/2G2C

(Lot de 4 Demi-barrières connectés)

REF : LSUGH2BPLTXO6C

(Lot de 4 barrières 3/4 connectés)



ALERTE – ACTIVATION FREINS

OPTION 2

• Des freins non enclenchés peuvent être un facteur aggravant de chute ou de traumatisme. L'alerte détecte chaque essieu et se déclenche dès que l'un d'entre eux n'est pas activé.

REF : LSUGHCFLE – Détection freins



ALERTE – PRESENCE DU RESIDENT

OPTION 3

• Pour les personnes désorientées, il est important de pouvoir détecter leur présence ou non dans le lit. Selon le profil du résident cette alerte peut être personnalisée et déclenchée à 15 sec, 3 min et 12 min.

REF : LSUGHCPPF – Détection présence



ALERTE – DETECTION INCONTINENCE

OPTION 4

• L'incontinence touche de nombreuses personnes désorientées et est parfois difficilement détectable.

Notre système permet d'alerter le personnel soignant dès lors que des traces d'humidité sont constatées dans le lit.

REF : LSUGHCHUMV – Détection incontinence

REF : 40116600 – Tapis d'incontinence



3 INDICATEURS D'ALERTE VISUELLE

- VI Box rouge clignotant
- Pourtour Nurse control rouge clignotant
- Lumière LED clignotante de la fonction sur la Nurse Control

Focus – Nurse Control

Fonctions du lit

• Les commandes traditionnelles du lit sont présentes et peuvent être verrouillées individuellement

Positions additionnelles

- Position d'urgence CPR
- Position d'urgence Trendelenburg
- Position fauteuil
- Position nuit (position basse)



L'avertisseur sonore peut être utilisé ou non

• Pour l'activer ou le désactiver, appuyer sur le bouton correspondant. L'alerte sonore est activée lorsque la lumière LED est allumée

Alerte de détection

• Chaque alerte est représentée par une touche verte. Pour activer ou désactiver une alerte appuyer sur le bouton correspondant. L'alerte est activée lorsque la lumière LED est allumée



Vous souhaitez en savoir plus !

- Découvrez notre vidéo spécialement conçue pour comprendre et visualiser les différentes alertes proposées par le Lit connecté VISIONA
- Cliquez sur l'icône pour en savoir plus*