

Le lit médicalisé électrique 5 fonctions **ACTILIT** a été spécialement conçu pour les **établissements les établissements d'hospitalisation**. Sa **conception par biellette offre au patient et au personnel soignant confort, aisance et facilité** dans son utilisation, nettoyage au quotidien. Ses différentes options et accessoires répondent aux besoins des différentes pathologies. Enfin Notre large choix de coloris et de panneaux permet d'humaniser ce lit et de l'adapter aux contraintes fonctionnelles et esthétiques des services de santé.



Spécifications techniques

SYSTÈME D'ÉLEVATION

BIELLETTES

- La conception à élévation par biellettes permet une élévation aisée et une utilisation durable du lit

PANNEAUX

- 2 types de panneaux (démontage sans outils)
- Panneau polypropylène PP pour une hygiène maximum, Personnalisable avec son insert stratifié (épaisseur 40 mm)
- Panneau plein mélaminé pour plus d'esthétisme (épaisseur 38 mm)

ANCrages ACCESSOIRES

- 4 pour porte sérum
- 2 pour support télécommande (à la tête du lit)
- 4 pour porte potence

CPR

- Le mécanisme de remise à plat d'urgence du relèvement buste est accessible rapidement via 2 poignées manuelles bilatérales

ROUES

- Roues multidirectionnelles simple galet de diam. 125 mm dont 2 avec freins intégrés (visuel du lit présenté avec des roues en 150 mm double galets)

FONCTIONS

MULTIFONCTIONNEL

- Hauteur variable / Relève buste (à translation) / Relève jambes (plicature des genoux) / Relève pieds / Procline & Décline / Position fauteuil

SOMMIER

- 3 modules plan compact amovibles extrêmement résistants (durée de vie optimale)

BATTERIE

- Batterie de secours (incluse)



COMMANDES

- Intuitives via la télécommande filaire (inclus) patient avec la possibilité de bloquer chaque fonction
- (en option) Commandes intégrées sur les demi-barrières :
 - > Soignant (extérieur)
 - > Patient (intérieur)
 - > Combiné (les deux)
- (en option) Satellites :
 - > Soignant avec ou sans écran LDC (en pied de lit)
 - > Patient (sur flexible en tête de lit)

RALLONGE


- Intégrée en pied de lit avec repose complément de matelas (accès facile et mise en place sans outils)

BUTÉES MURALES

- Butées de protection arrondies intégrées directement au niveau du sommier

FREINAGE

- (en option) Centralisé en pied de lit (avec les roues servo. 125 ou 150 mm)

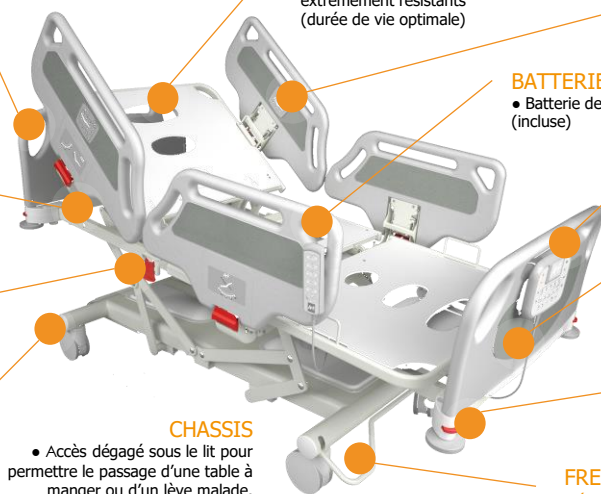

Données principales

Hauteur variable (roues de diam. 125 mm)

45 cm – 76 cm

Capacité max. (poids patient)
Poids à vide (sans accessoires)

**230 Kg (165 Kg)
150 Kg**

Angle relève buste
Plicature des genoux
Relève pieds
Angle procline / décline

**70° (max)
25° (max)
12° (max)
12° / 12° (max)**

Rallonge

13,5 cm

Dimensions (sans barrières)
Surface de couchage

**218 x 95 cm
200 x 90 cm**

Matériaux
(suivant le choix du panneau)

**Acier, Polypropylène,
Stratifié, Mélaminé**

Roues à simple galet

360° / Ø 125 mm

Tension d'alimentation

**100-230 V, 50/60 Hz
Max 3,15 A**


Certification
Normes

**CE (UE 2017/745)
NF EN 60601-2-52
NF EN 60601-1-2
NF EN 60601-1**

Personnalisation et Accessoires



Gris Cubanite

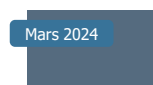

Mars 2024

Bleu Brume
<NEW> MARS 2024



Bleu Horizon

Découvrez l'ensemble des coloris stratifiés disponibles sur notre nuancier

Couleur (structure du lit)

RAL 9002 Blanc crème
RAL 9002

Accessoires disponibles

- Roues simple galet servo. de diam. 125 mm
- Roues double galet servo. de diam. 150 mm
- 5^{ème} roue directionnelle
- Panneau plein mélaminé 38 mm
- Panneau tête fixe (sur châssis)
- Pédales de commande hauteur variable
- Commandes intégrées Patient et/ou Soignant
- Satellites Patient et /ou Soignant
- Potence à enrouleur
- Tige porte sérum 4 crochets
- Support flexible de télécommande
- Veilleuse sous le lit
- Porte sac urine (sur sommier) ou urinal simple (sur barrière 3/4)
- Porte bocal
- Porte redon
- Porte-cassette
- Porte-bassin (sur barrières 3/4)
- Porte-obus (sur panneau tête fixe)
- Porte-documents
- Attaches sangles standard et grande boucle
- Cadre de traction
- Boîtier Bluetooth
- Protection mousse pour barrière 3/4

Barrières disponibles

- Demi-barrières
- Barrière 3/4

Hygiène & Désinfection

- Le produit est à pulvériser ou à appliquer à l'aide d'une lingette à usage unique
- Il est également recommandé de procéder au nettoyage de haut en bas